

CARUM

SACALECHES PARA HOSPITALES

Ardo ha desarrollado el sacaleches de grado-clínico Carum para alcanzar los requisitos más exigentes tanto para las madres como para los profesionales de la salud. El resultado es un extractor potente, fiable y sensible, perfectamente adaptado para cumplir con todos los requisitos.



Único – modo de extracción y estimulación individualmente ajustable

El sacaleches de grado-clínico Carum posee muchas ventajas: es potente y a la vez ideal para usar en situaciones sensibles. Además no tiene rival en el sector de doble extracción gracias a su sistema de doble pistón. Entre otras características de este sacaleches podemos destacar su habilidad para cambiar entre modo extracción y modo estimulación en cualquier momento, su gran pantalla a color y un menú de control intuitivo. La tecnología "Vacuum Seal" garantiza la máxima seguridad e higiene.

- Extracción totalmente automática con el toque de un botón
- Ajuste individual de la intensidad de vacío y la frecuencia de ciclo – en modo extracción y modo estimulación
- Cambio suave entre modo estimulación y extracción
- Posibilidad de cambiar de modo en cualquier momento
- "Sensitive Programme" para pezones irritados y doloridos
- Fácil de usar y limpiar
- Opcional con batería recargable
- Carro disponible
- Disponible para alquilar




Individual Phases

Los sacaleches de Ardo se adaptan a las necesidades personales de las madres y a la succión individual de cada bebé en cualquier momento. Los ajustes de intensidad de vacío y ciclo pueden cambiarse en cualquier momento.

Para madres que quieren decidir por sí mismas

Las madres prefieren poder configurar ellas mismas el número de ciclos e intensidad de vacío y adaptarlo así a sus necesidades. Carum es el primer extractor que permite controlar individualmente en modo estimulación y extracción, los ajustes de ciclo y vacío.

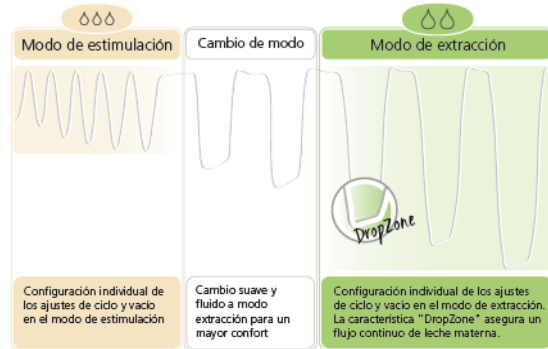

Sensitive Programme

Inicio de ciclo y proceso de extracción especialmente lento y suave para pezones irritados y doloridos.



DATOS TÉCNICOS

	Modo de estimulación	Modo de extracción	Programa sensitivo
Vacío (Intensidad de succión)	30 – 150 mbar Inicia en 60 mbar	30 – 330 mbar Nivel de inicio 30 mbar más alto que el modo estimulación	Nivel de inicio 30 mbar
Cíclos (Frecuencia de succión)	72 – 120 por minuto Inicia a 90 por minuto	30- 60 por minuto Inicia a 45 por minuto	Nivel de inicio a 30 por minuto
Tensión/ frecuencia de la Fuente de alimentación	100 -230 VAC / 50 – 60 HZ		



- Fácil de limpiar gracias a su superficie lisa.
- Gran pantalla a color que proporciona mayor visibilidad.
- Función de atenuación de pantalla para cómoda extracción por la noche.
- Temporización y cronómetro.
- Disponible con carro (opcional)